



Enjoy Mobility



K-MODTM
CCK
REV

KNEE-MODULAR REVISION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO




El sistema de revisión de rodilla K-MOD REV CCK está diseñado para artroplastia total de rodilla primaria y de revisión en caso de inestabilidad o ligamentos colaterales con funcionalidad inadecuada.

El sistema K-MOD REV CCK es completamente compatible y modular con el sistema K-MOD REV BOXLESS: los objetivos son, de hecho, poder hacer más efectivas las operaciones de revisión, y adaptarse a las diferentes situaciones anatómicas y a las necesidades del cirujano, incluso en casos de ligamentos colaterales dañados.

La prótesis K-MOD REV CCK comparte con K-MOD REV BOXLESS:


- Componente tibial
- Componente patelar
- Vastagos tibiales y femorales
- Módulos offset tibiales y femorales
- Cuñas femorales (distal y posterior) y tibiales



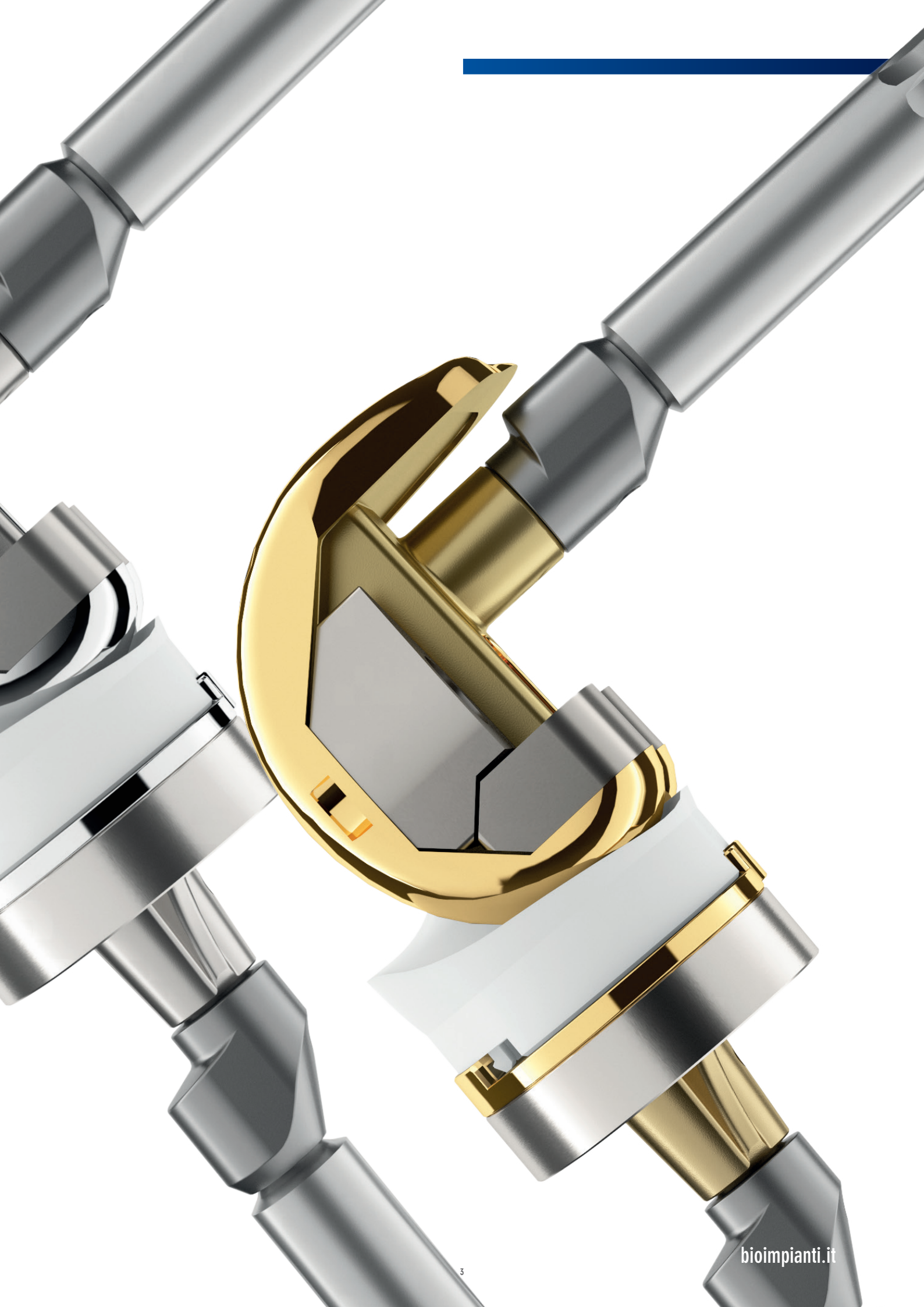

Materiales:

- Componente femoral y tibial: aleación CoCrMo
- Vástagos, módulos offset, aumentos: aleación Ti6Al4V
- Insertos y componente patelar: UHMWPE, esterilización con óxido de etileno (EtO)
- Versión analérgica: recubrimiento TiNbN. Tecnología de recubrimiento: PVD (deposición física de vapor)

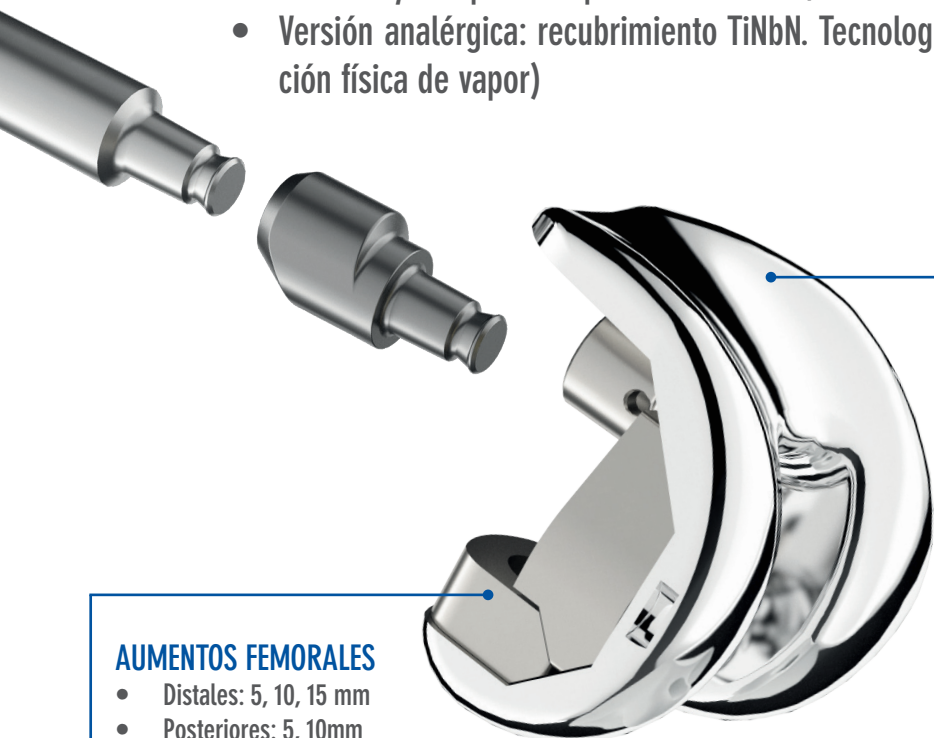


AUMENTOS FEMORALES

- Distales: 5, 10, 15 mm
- Posteriores: 5, 10mm
- Diseñados para reconstruir la dimensión anteroposterior correcta del componente femoral

FÉMUR

- 6 medidas anatómicas (De/Iz)
- RAYO DOBLE: el primer rayo actúa de la extensión hasta 30° de flexión; el segundo rayo, más pequeño, trabaja hasta 90° de flexión
- REDUCCIÓN DEL NOTCHING: la inclinación frontal (4°) del componente femoral reduce el notching
- TENSIÓN REDUCIDA EN EL TENDÓN ROTULIANO: la ranura troclear, caracterizada por un ángulo de 6°, diseñada para seguir mejor el movimiento de la rótula durante todo el rango de movimiento

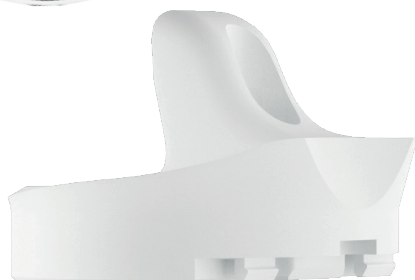

INSERTOS

- 6 medidas
- 7 espesores
- Rotación interna y externa: +/- 3°
- Constricción varus/valgus: +/- 2°
- CAM RONDEADA: facilita la cinemática natural de la rodilla sin estresar y desgastar el post
- HIPEREXTENSIÓN: el sistema permite más de 5° de hiperextensión antes del contacto entre post y cam
- JUMP HEIGHT: los insertos CCK tienen una altura mayor que los insertos de estabilidad posterior (PS), para reducir la posibilidad de dislocación anterior del fémur. Dependiendo de la medida, el jump height varía de 18 a casi 21mm.



VÁSTAGOS

- Un modelo unico para fémur y tibia y para K-MOD REV CCK y K-MOD REV BOXLESS
- Diámetros de 10 a 20mm (incremento de 1mm)
- Longitud: 60, 100, 140mm
- Vástagos de 140mm con diapasón



TIBIA

- En común con K-MOD REV BOXLESS
- 6 medidas simétricas
- Fija
- Con agujeros para aumentos y tornillos corticales



AUMENTOS TIBIALES

- Mediales y Laterales
- Simétricos: 5,10 mm
- Anatómicos: 15mm



MÓDULO OFFSET


- Un modelo unico para fémur y tibia y para K-MOD REV CCK y K-MOD REV BOXLESS
- Módulos off-set: 3, 6mm
- Conexión directa: 0mm





MODULARIDAD COMPLETA: la modularidad de **K-MOD REV CCK** con el sistema **K-MOD REV BOXLESS** permite elegir intraoperatoriamente el grado de constricción más adecuado:


- ESTABILIZACIÓN ANTERIOR y POSTERIOR mediante insertos UltraCongruent (UC) o insertos Dynamic Congruence (DC) acoplados al fémur K-MOD REV BOXLESS o insertos de estabilidad posterior PS con el fémur K-MOD REV CCK.
- CONSTRICCIÓN en VARO/VALGO y ROTACIÓN FEMOROTIBIAL usando los insertos CCK combinados con el fémur K-MOD REV CCK.

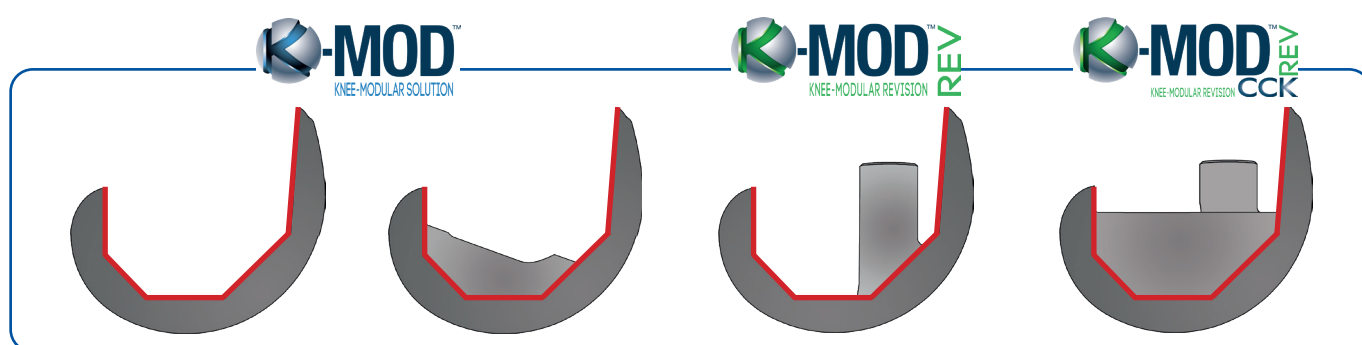

El sistema de prótesis primaria K-MOD System y el sistema de prótesis de revisión K-MOD REV CCK y K-MOD REV BOXLESS comparten:

- mismo perfil femoral
- mismas dimensiones tibial y femoral en ML y AP

para garantizar la máxima MODULARIDAD entre los dos sistemas.

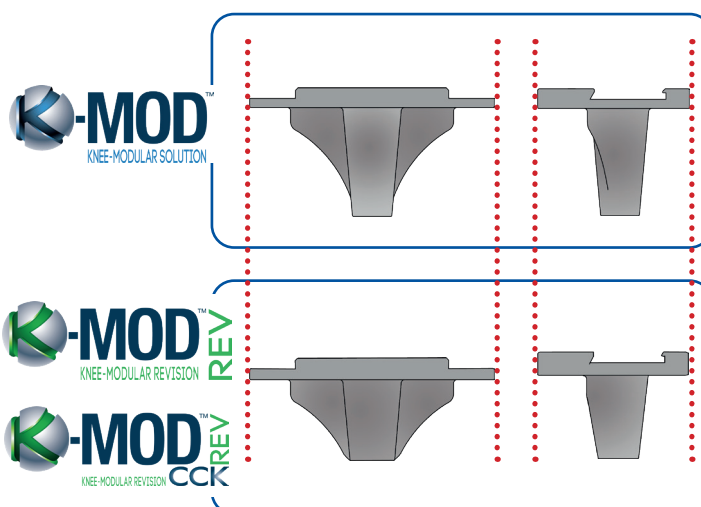

K-MODTM REV
KNEE-MODULAR REVISION CCK

K-MODTM REV
KNEE-MODULAR REVISION

K-MODTM
KNEE-MODULAR SOLUTION

FÉMUR K-MOD REV CCK

FÉMUR K-MOD REV BOXLESS

FÉMUR K-MOD PS

FÉMUR K-MOD CR

INSERTO CCK

INSERTO UC FX

INSERTO DC

INSERTO APS MOB

INSERTO PS FX

TIBIA K-MOD REV

INSERTO CR

INSERTO UC MOB

INSERTO PS FX

INSERTO PS MOB

TIBIA K-MOD FX

TIBIA K-MOD FX

TIBIA K-MOD MOB



Acoplamiento Fémur CCK + Inserto PS: ¡SÍ!
Acoplamiento Fémur PS + Inserto CCK: ¡NO!

*En caso de Inserto CCK Insert + tibia K-MOD primaria: utilice un vástago tibial K-MOD

Consulte la técnica quirúrgica para los tamaños disponibles bioimpianti.it

Página web

Utilice el código QR para visitar la página web de Gruppo Bioimpianti



IFU

Utilice el código QR para ver la información completa del producto, incluidas las instrucciones de uso, indicaciones y contraindicaciones, precauciones y advertencias.



KMODREVCK-IP-002-REV 00 2023



Este documento está destinado exclusivamente a los profesionales médicos, especialmente médicos y cirujanos. Este documento no constituye un consejo médico, no dispensa recomendaciones médicas y no transmite ninguna información diagnóstica o terapéutica.

Las informaciones y técnicas presentadas en este documento fueron compiladas por un equipo de expertos médicos y de especialistas de Gruppo Bioimpianti; pero Gruppo Bioimpianti no se hace responsable del uso incorrecto. Para cualquier información y pregunta sobre esta publicación o cualquier otra cosa, contactar con GRUPPO BIOIMPIANTI.



Enjoy Mobility

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.

Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy

Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393

info@bioimpianti.it

bioimpianti.it